

WelchAllyn®



Welch Allyn
Monitor Connex® Spot

Welch Allyn Monitor Connex[®] Spot

Invio accurato ed automatico dei parametri vitali direttamente dal punto di assistenza alla cartella clinica elettronica del cliente per una maggiore sicurezza del paziente e un'ottimizzazione del processo clinico decisionale.

Monitor per visionare l'acquisizione dei parametri vitali di routine, il monitoraggio dell'intervallo e la personalizzazione degli scores. Più l'integrazione alla cartella clinica elettronica che permette ai clinici di accedere immediatamente alle informazioni desiderate, ovunque e in qualsiasi momento.



Migliorare i risultati e la soddisfazione del paziente

- > Ridurre gli errori di trascrizione e le omissioni trasferendo automaticamente i dati relativi ai parametri vitali del paziente e altri dati direttamente alla cartella clinica elettronica del cliente
- > Campi personalizzabili per una documentazione completa direttamente al punto di assistenza, eliminando la fase di inserimento dei dati nei computer
- > Compatibile con una vasta gamma di prodotti detergenti per ridurre il rischio di contaminazione incrociata
- > Industria leader nelle tecnologie dei parametri vitali leader del settore per assicurare l'accuratezza e le prestazioni in diverse popolazioni di pazienti

Supporto per la gestione dell'alimentazione accessoria con tecnologia WhisperDrive™

- > Caratteristiche esclusive per una gestione dell'alimentazione in grado di assicurare il funzionamento dell'apparecchiatura anche se il precedente turno ha dimenticato di ricaricarla
- > La tecnologia WhisperDrive garantisce una manovrabilità semplice e silenziosa che riduce al minimo il disturbo per il paziente
- > L'illuminazione a LED aiuta i clinici ad operare in camere buie senza disturbare il paziente
- > Piccola superficie di lavoro che migliora l'ergonomia e garantisce sempre un posto comodo per i documenti
- > Organizzazione degli accessori per prevenire l'attorcigliamento dei cavi e il danneggiamento dei sensori
- > Stoccaggio di detergenti per incoraggiare un'adeguata pulizia del dispositivo

Design aggiornabile nel tempo per contribuire a proteggere l'investimento del cliente

Soluzioni progettate per l'ambiente clinico/chirurgico, con display touchscreen configurabili e di facile utilizzo. Le opzioni di aggiornamento consentono di affrontare il futuro serenamente, mantenendo i pazienti protetti e migliorando gli outcomes:

- > Masimo[®] SpO₂
- > Nellcor[®] OxiMax™ SpO₂
- > Nonin[®] SpO₂
- > Termometro Braun PRO 6000
- > Termometro SureTemp[®] Plus
- > Scansione di codici a barre
- > Compatibile con una vasta gamma di reti wireless e protocolli di sicurezza
- > Accesso ad aggiornamenti software da remoto e accessori USB



Aumentare la produttività e la soddisfazione del personale

- > Progettato dai clinici per aumentare l'efficienza e la soddisfazione dello staff
- > Interfaccia utente intuitiva dotata di touchscreen per semplificare la formazione e il funzionamento
- > Indicazioni su schermo per guidare gli utenti privi di esperienza durante la navigazione nel flusso di lavoro clinico


Proteggere le informazioni sul paziente

- > La schermata facoltativa di autenticazione del clinico limita l'accesso alle informazioni riservate sullo stato di salute del paziente
- > Funzionalità facoltative, ad esempio l'uso di abbreviazioni, contribuiscono a proteggere le informazioni che consentirebbero l'identificazione del paziente durante il loro utilizzo per motivi clinici
- > Eliminazione automatica dei dati del paziente dopo l'invio alla cartella clinica elettronica



Migliorare la sicurezza del paziente

- > Catturare dati specifici direttamente al letto del paziente per permettere ai clinici di documentare e tracciare eventuali sintomi di peggioramento
- > Permettere il caricamento di un massimo di tre protocolli già utilizzati dalla struttura, ad es. il MEWS, o altre modalità di calcolo
- > Visualizzare le raccomandazioni del reparto basate sugli esiti del paziente per supportare i clinici durante le fasi successive e permettere di prendere velocemente decisioni cliniche informate

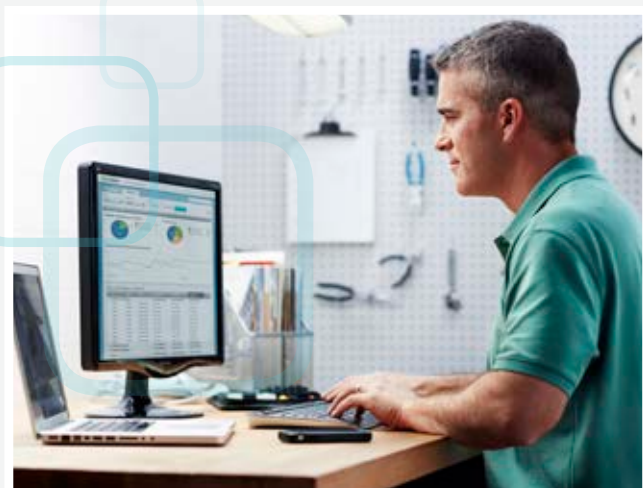

Partners in CareSM Services per il monitor Connex Spot

Welch Allyn offre una suite completa di servizi che contribuiscono a proteggere l'investimento del cliente e assicurare che i clinici abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per prendere decisioni cliniche informate.

- > **Soluzione esclusiva Enterprise Deployment** che assicura che i monitor del cliente arrivino già configurati in base alle sue stesse indicazioni
- > **Assistenza Biomedical e Training di Riparazione** per permettere allo Staff di riparare e mantenere i dispositivi all'interno della propria struttura
- > **Programmi di supporto** che coprono la riparazione delle parti e la sostituzione degli accessori, per un supporto efficiente ed economicamente conveniente del dispositivo
- > **Service Dashboard** che garantisce un monitoraggio proattivo dei dispositivi connessi, la configurazione e l'installazione remoti

Configurazioni disponibili

MONITOR CONNEX SPOT	7100	7400	7500
Parametri			
SureBP® NIBP	●	●	●
Termometro SureTemp® Plus	●	● ↑	● ↑
Termometro auricolare Braun PRO 6000	●	● ↑	● ↑
Masimo o Nellcor OxiMax® SpO ₂		●	●
Nonin SpO ₂	●		●
Comunicazioni			
WiFi		↑	●
USB, Ethernet	●	●	●
Accessori			
Supporto mobile classico	●	●	●
Supporto APM	●	●	●
Canalina a parete GCX	●	●	●
Scanner per codici a barre	●	●	●

● Incluso

● Opzionale

↑ Aggiornabile

ACCESSORI

7000-APM	Supporto per la gestione dell'alimentazione accessoria di Connex Spot
7000-MS3	Supporto mobile classico di Connex Spot
7000-GCX	Canalina a parete GCX VESA per Connex Spot
6000-NC	Cavo del dispositivo di chiamata infermiera VSM 6000
7000-916HS	Scanner per codici a barre HSI 2D
106275	Cavo USB del kit collegamento accessori
6000-50	Memory Stick di configurazione USB VSM 6000
7000-PS	Alimentazione (richiesta quando non viene ordinato un montaggio su supporto o a parete)
BATT22	Batteria agli ioni di litio CSM
BATT99	Batteria agli ioni di litio per supporto APM
4500-35	Manicotto per la misurazione della pressione arteriosa con FlexiPort (circa 3 metri (10 ft))
7000-33	Manicotto per la misurazione della pressione arteriosa neonatale (circa 3 metri (10 ft))
LNCS-DCIP	Sensore da dito, pediatrico, riutilizzabile, Masimo
D-YS	Sensore Nellcor Dura-Y®
D-YSPD	Sensore da dito pediatrico Nellcor PediCheck® (richiede D-YS)
2360-010	Sensore pediatrico riutilizzabile Nonin (2 m)
S1-CSM-5	Programma di partenariato completo CSM, 5 anni
S2-CSM-5	Programma di partenariato Biomed CSM, 5 anni
S4-CSM-5	Estensione della garanzia, CSM, 5 anni

Sono disponibili anche programmi di assistenza della durata di uno - due anni.

Welch Allyn EMEA&I Customer Care
IDA Business Park - Johnstown
Navan, County Meath
Ireland
Tel: +39 0269682425
Fax: +39 0269633697
Email: italia@welchallyn.com

WWW.WELCHALLYN.IT

© 2014 WELCH ALLYN MCI1976 SM4126IT Rev A

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™